



Въведение в ендоскопията

ОСНОВНО НИВО

10-11 март 2026 г.

Флексибилни ендоскопи – поддръжка и съхранение



Д-р Симеон Пачев – младши
Ветеринарна клиника Провет
dr_pachev@provetcclinic.com

- превенция на инфекции
- скъпа и деликатна апаратура
- трудна за отремонтране



› [Gastroenterol Nurs.](#) 1991 Oct;14(2):72-9. doi: 10.1097/00001610-199110000-00003.

Infection control practices in gastrointestinal endoscopy in the United States: a national survey

G J Gorse, R L Messner

Review › [Curr Opin Infect Dis.](#) 2005 Aug;18(4):326-30. doi: 10.1097/01.qco.0000171925.47452.8f.

Recent advances in epidemiology and prevention of gastrointestinal endoscopy related infections

Douglas B Nelson ¹

Review › [Dig Dis Sci.](#) 2022 May;67(5):1718-1732. doi: 10.1007/s10620-022-07441-8.

Epub 2022 Mar 9.

Gastrointestinal Endoscopy-Associated Infections: Update on an Emerging Issue

Anasua Deb ^{# 1}, Abhilash Perisetti ^{# 2}, Hemant Goyal ^{# 3}, Mark M Aloysius ^{4 5}, Sonali Sachdeva ⁶, Dushyant Dahiya ⁷, Neil Sharma ^{8 9}, Nirav Thosani ¹⁰



infinita
academy

Въведение в ендоскопията

ОСНОВНО НИВО

10-11 март 2026 г.

[Animals \(Basel\)](#). 2020 Dec; 10(12): 2265.

Published online 2020 Dec 1. doi: [10.3390/ani10122265](https://doi.org/10.3390/ani10122265)

PMCID: PMC7760813

PMID: [33271911](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33271911/)

Incidence of Bacteremia Consequent to Different Endoscopic Procedures in Dogs: A Preliminary Study

[Alba Gaspardo](#), [Maria Chiara Sabetti](#), [Renato Giulio Zanoni](#), [Benedetto Morandi](#),* [Giorgia Galiazzo](#), [Domenico Mion](#), and [Marco Pietra](#)

5. Conclusions

[Go to: ▶](#)

In conclusion, to the best of the authors' knowledge, there are no guidelines regarding preventive antibiotic therapy following these endoscopic procedures in dogs. These preliminary results tended to exclude the preventive use of antibiotics following endoscopic procedures, unless related to the disease diagnosed. However, additional studies confirming the low incidence and transient nature of the bacteremia are certainly recommended, as is including and evaluating the categories of dogs potentially considered at risk.

SCAN ME






Въведение в ендоскопията

ОСНОВНО НИВО

10-11 март 2026 г.

- предварително почистване
- почистване и дезинфекция
- изплакване и подсушаване

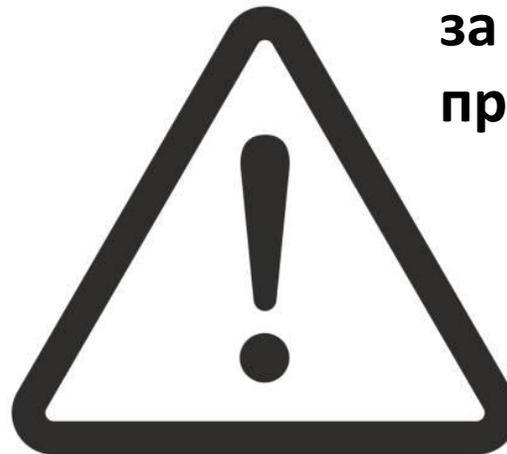

Винаги следвайте инструкциите за почистване предоставени от производителя !



Въведение в ендоскопията

ОСНОВНО НИВО

10-11 март 2026 г.

Предварително почистване

- веднага след края на процедурата
- предотвратява формирането на биофилм
- премахване на тромпетните бутони, капачката на инструменталния порт и накисването им в отделен съд с ензимен разтвор





Въведение в ендоскопията

ОСНОВНО НИВО

10-11 март 2026 г.

Почистване

- Leak test

- проверка за наличие на увреждане на външната част на ендоскопа, или неговите канали
- задължително поставяне на водонепромокаемата капачка на ендоскопа, след откачането му от процесора





infinita
academy

Въведение в ендоскопията

ОСНОВНО НИВО

10-11 март 2026 г.



Почистване и дезинфекция

- потапяне в почистващ/дезинфекционен разтвор
- промиване на каналите на ендоскопа
- използване на четка за почистване на каналите
- накисване на всички отделящи се части
- накисване за определеното от производителя на разтвора време





Въведение в ендоскопията


ОСНОВНО НИВО

10-11 март 2026 г.

Изплакване

- изплакване и промивка на каналите
- използване на дестилирана вода



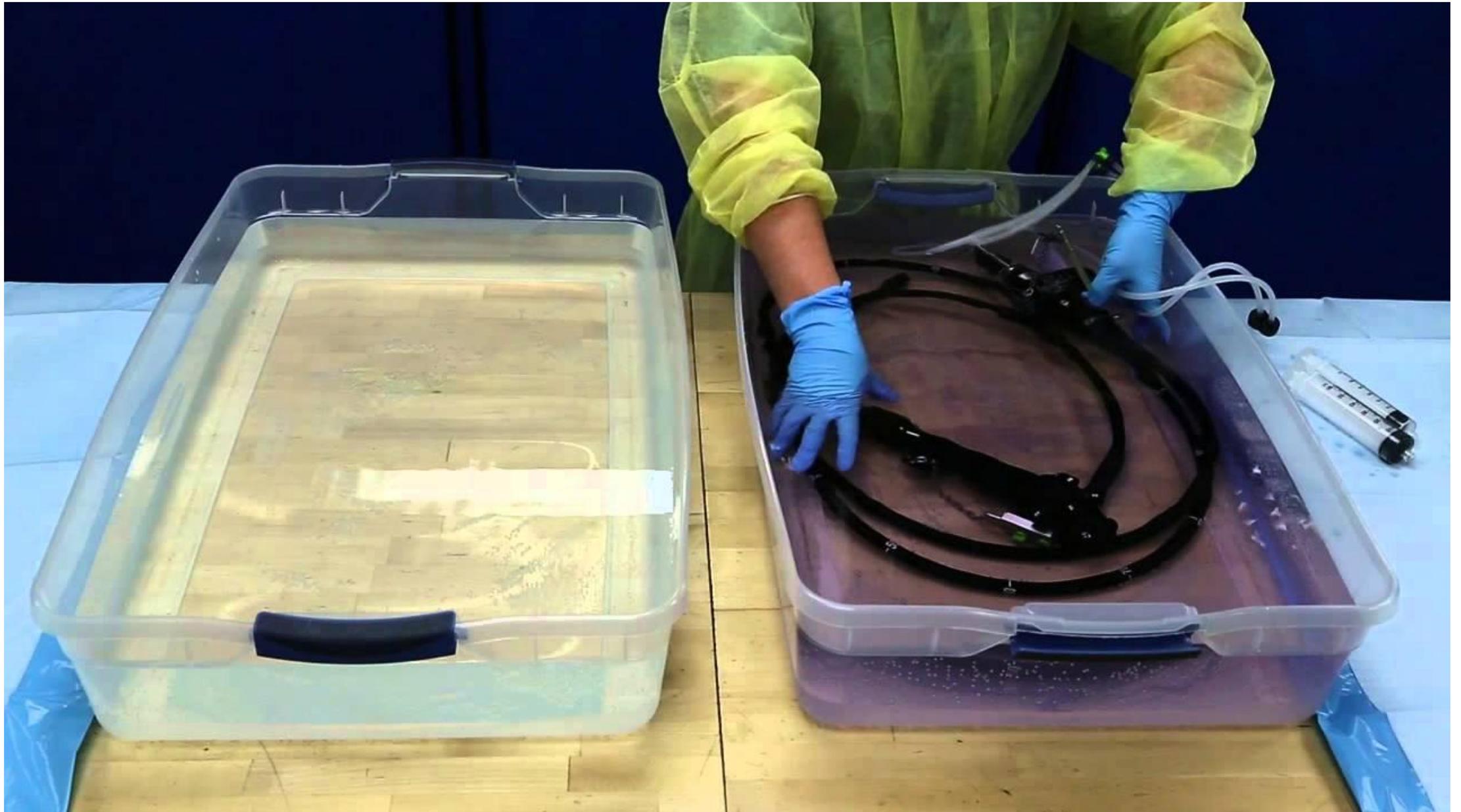



Въведение в ендоскопията

ОСНОВНО НИВО

10-11 март 2026 г.

Подсушаване

- подсушаване с мека кърпа
- подсушаване на каналите с въздух





Въведение в ендоскопията

ОСНОВНО НИВО

10-11 март 2026 г.

Съхранение

- окачване във вертикална позиция





Въведение в ендоскопията

ОСНОВНО НИВО

10-11 март 2026 г.

